

XXL Bed Standaard




XXL - Bed Lux



Gemakkelijk te transporteren



Uiterst solide systeem met zijrails

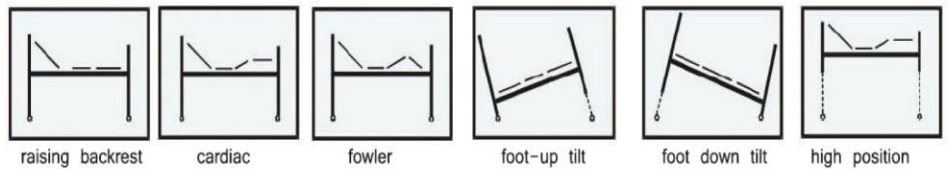

Krachtige motorunits

Het bed wordt geleverd met zijstukken op rails over de volledige lengte en een hoofd- en voetenbord van kwaliteitshout.

Het is ontworpen voor 1 persoon van maximaal 318 kg. Het Bariatric Lux-bed heeft een sterk stalen frame, afgewerkt met duurzame poedercoating. Aangesloten op netspanning, plaatsen motoren aan hoofd- en voeteneinde de bedbodem op elke hoogte tussen 420mm en 815mm (Bariatric Low tussen 260mm en 625mm). Men kan met behulp van de afstandsbediening het hoofd- en voeteneinde ook kantelen. Twee bijkomende motoren onder de bodem maken de rug- en knieondersteuning volledig instelbaar.

Afmetingen:

Totale lengte	2235mm
Totale breedte	1360mm
Lengte patiëntoppervlak	2000mm
Breedte patiëntoppervlak	1200mm
Verstelbare hoogte	420-815mm (Bariatric Lux)
Verstelbare hoogte	260-625mm (Bariatric Low)



Bediening met uitschakelfunctie